

LÖWENSTEIN
medical

JULIA




Mehr Raum für Träume.

Die kleine Freiheitsliebende

JULIA ist eine kleine Nasalmaske, die sich insbesondere für Seitenschläfer*innen und Brillenträger*innen eignet. Sie passt sich vielen verschiedenen Gesichtsformen an und kommt ganz ohne Stirnstütze aus. Wer beim abendlichen Ritual entspannen möchte, kann Maske und Brille somit gleichzeitig aufsetzen.

Dank des schmalen Designs und des passgenauen Maskenkissens sitzt JULIA fast schwerelos auf dem Gesicht, folgt jeder Bewegung und schafft dadurch einfach mehr.

Mehr Freiheit und mehr Raum für Träume.

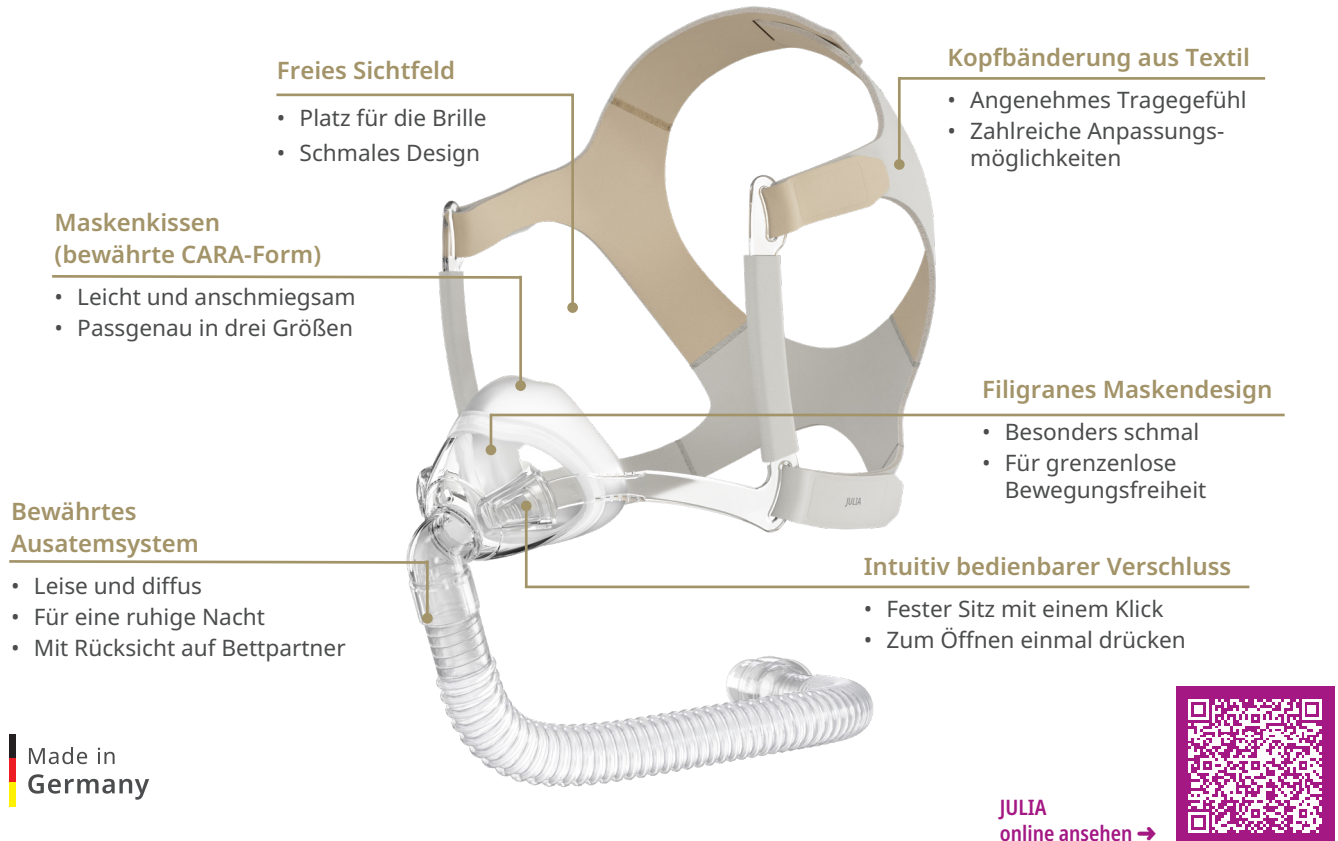

Genauere Passform, schmales Design

Mit JULIA fühlt sich die Therapie vollkommen natürlich an. Das schmale Design bietet Freiheit bei der Abendroutine sowie im Schlaf. Die sehr gute Passform wurde von dem bewährten Modell CARA übernommen. Das Maskenkissen schmiegt sich an Ihre individuellen Gesichtskonturen an und sorgt für dauerhaften Tragekomfort – unabhängig von der Form und Größe Ihres Gesichts.

Freies Sichtfeld für Brillenträger*innen und Seitenschläfer*innen

Eine Neuheit bei JULIA ist das freie Sichtfeld ohne Stirnstütze. Abends lesen, fernsehen oder aufs Handy schauen gelingt jetzt mit Maske *und* Brille. Seitenschläfer*innen liegen ohne Stirnstütze besonders bequem. Nichts drückt oder verrutscht in dieser Position.

Angenehme Textil-Kopfbänderung

Die Kopfbänderung von JULIA sorgt für einen stabilen Sitz der Maske und bietet dank der weichen, hautfreundlichen Materialien gleichzeitig ein angenehmes Gefühl auf der Haut.

Schmalere Maskenschlauch für grenzenlose Bewegungsfreiheit

Das filigrane Design der Maske beinhaltet einen passenden Maskenschlauch. Er ist deutlich schmäler als die üblichen Geräteschläuche und sehr flexibel. Bei Bewegungen in der Nacht passt er sich an, sodass der Schlaf nicht gestört wird.

Intuitiv bedienbarer Verschluss

Der Maskenverschluss ist leicht zu bedienen. Der Clip lässt sich einfach in den Maskenkörper schieben und schließt mit einem hörbaren Klicken. Am Morgen wird der Verschluss mit einem Fingerdruck auf die seitliche, geriffelte Fläche wieder gelöst.

Die Nachhaltige

Ressourcenschonend verarbeitet

Bei der Kopfbänderung dieser Maske ist uns eine nachhaltige Verbesserung gelungen, die den Wasser-, Energie- und Chemikalienverbrauch deutlich reduziert. Wir sind nun in der Lage, die Faserproduktion und den Färbeprozess so zu kombinieren, dass der zusätzliche Färbeprozess vollständig entfällt.

Mit nachwachsenden Rohstoffen

Die Verpackung von JULIA besteht zu 80 % aus dem nachwachsenden Rohstoff Zuckerrohr.

Einfach zu recyceln

Die Maskenteile von JULIA sind fast ausschließlich so gestaltet, dass sie sortenrein recycelt werden können. In der Herstellung vermeiden wir Materialmischungen, damit sich die Maske am Ende ihres Lebenszyklus problemlos in den Wertstoffkreislauf zurückführen lässt.

Dadurch werden folgende Einsparungen erzielt¹:



↓ -90 %
Frischwasser



↓ -94 %
Abwasser



↓ -66 %
Energieverbrauch



↓ -70 %
Chemikalien




¹ Vom Hersteller ermittelte Werte

Ersatzteile



Kopfbänderung JULIA
inkl. Bänderungsclips
standard: LMT 26856
large: LMT 26949

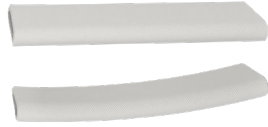

Überzieher 2 Stk.
LMT 17830



Maskenkissen JULIA
Gr. S: LMT 26636
Gr. M: LMT 26637
Gr. L: LMT 26638



Maskenschlauch mit Anschlüssen
LMT 26713

Weitere Informationen zu unseren Therapielösungen, Zubehör und Maskensystemen finden Sie unter loewensteinmedical.com

Technische Daten JULIA

Produktklasse nach Verordnung MDR (EU) 2017/745	II a	Therapiedruck	4 hPa – 30 hPa
Abmessungen (B x H x T)		Temperaturbereich	
• Größe S	53 x 61 x 75 mm	• Betrieb	+5 °C bis +40 °C
• Größe M	58 x 60 x 76 mm	• Transport und Lagerung	-20 °C bis +70 °C
• Größe L	62 x 64 x 77 mm		
Gewicht		Strömungswiderstand	
• Größe S	77 g	• bei 50 l/min	0,6 hPa
• Größe M	78 g	• bei 100 l/min	2,3 hPa
• Größe L	80 g		
Totraumvolumen		Angegebener Zweizahl-Geräusch-Emissionswert nach ISO 4871:	
• Größe S	68 ml	• Schalldruckpegel	18 dB(A)
• Größe M	78 ml	• Schalleistungspegel	26 dB(A)
• Größe L	92 ml	• Unsicherheitsfaktor	3 dB(A)
Schlauchanschluss	Ø 22 mm (männl.)	Lebensdauer	5 Jahre
Konus nach EN ISO 5356-1		Gebrauchsdauer	bis zu 12 Monate ¹
		Angewandte Normen	EN ISO 17510: 2020

¹ Die Gebrauchsdauer ist abhängig von der Reinigung und der verwendeten Reinigungsmittel, von der täglichen Tragedauer, vom Therapiedruck und von der individuellen Schweißsekretion. Die Nutzung des zweiten Maskenkissens (optional enthalten) verlängert nicht die Gebrauchsdauer.

Gerätebezeichnung	Gr.	Artikel-Nr.	HMV-Pos.-Nr.
JULIA	S	LMT 26710	14.24.16.2089
JULIA	M	LMT 26720	14.24.16.2089
JULIA	L	LMT 26730	14.24.16.2089
JULIA inkl. 2. Maskenkissen	S	LMT 26710-1000*	14.24.16.2091
JULIA inkl. 2. Maskenkissen	M	LMT 26720-1000*	14.24.16.2091
JULIA inkl. 2. Maskenkissen	L	LMT 26730-1000*	14.24.16.2091

* 2. Maskenkissen derselben Größe im Lieferumfang enthalten

CE 0197

Made in
Germany



Gedruckt auf
100 % recyceltem Papier




Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburg, Deutschland

Vertrieb + Service
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

 Menschen im Mittelpunkt

